

# MOBIL ON STAIRS AND LANDINGS

## MOBIL AUF TREPPEN UND STUFEN



### Stairmate SA-3 // Treppenkuli SA-3

The Stairclimber is an easy to use, portable wheelchair lift designed to attach under most manual wheelchairs. Stairmate's powerful motor allows a small attendant to safely transport a larger passenger up and down stairways. Stairclimber is suitable for indoor or outdoor use in public buildings and private homes. An affordable and reliable portable access solution.

Mit dem Treppenkuli ist das Überwinden von Treppen - im Freien oder im Haus - kein Problem mehr. Von nur einer Hilfsperson geführt erklimmen die Raupen des Treppenkulis gerade Treppen bis zu einer Steigung von 35°, ohne Kraftanstrengung, vollkommen sicher.



**Easy transport**  
 Separate driving and handle unit  
Leichter Transport  
 Separate Antriebseinheit und separater Adapter




**Display**  
 Simply operating control button  
**Display**  
 Einfach arbeitende Bedienschalter




**Magnetholder of safety belt**  
 Magnethalter für Sicherheitsgurt

**Flexible extension system**  
 allows any time the installation  
 of wider and large wheelchair by  
 yourself  
Verbreiterungssystem  
 Ermöglicht jeder Zeit die Arretierung  
 von breiteren / größeren Rollstühlen

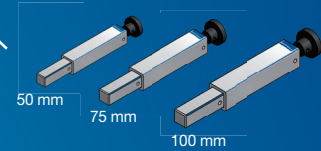

**Plugged extension of slide arm**  
 Aufsteckbare Verbreiterung des Holms

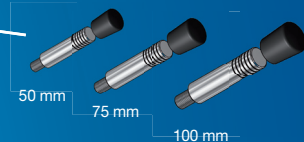

**Extension of supporting pipe by thread**  
 Schraubbare Verbreiterung der Radauflage

**Cover**  
 Good designed cover for safely operation  
 easy to disassemble  
Abdeckung  
 Schützende Abdeckung für sichere Anwendung  
 leicht zu demontieren

**Incl. rechargeable batteries and  
 charger (seperat)**  
 Inkl. wiederaufladbarer  
 Batterien und Ladegerät (seperat)

**Grey crawler**  
 None slip mark on floor -  
 grip stairs securely  
Graue Raupen  
 Spurlose Anwendung -  
 greifen sicher an den Stufen

**Loading socket for battery**  
 Ladebuchse für Batterie

**Special attachments // Besondere Vorrichtungen**

In combination with shoe attachment and multifunction clamp  
 suitable for wheelchairs with folding detachable backrest,  
 adjustable handle, hand brake lever or small wheelchairs 12 -  
 22 inch.

In Kombination mit Unterstützungsschuhen und der  
 Multifunktionsklammer geeignet für Rollstühle mit faltbarer  
 Rückenlehne, abnehmbaren Griffen, Bremsrollstühlen sowie  
 Kleinradrollstühlen. 300/400/500/550 mm Durchmesser.

**Specification // Spezifikation**

Capacity: 160 kg  
 Measurements: 1.486 mm x 690 mm x 918 mm (L/W/H)  
 Motor: 210W/ 30 min. rated output  
 Battery: valve regulated lead-acid battery  
 12 V 20 Ah / 20HR (2x6 V)  
 Operation in single charge: approx. 30 min.  
 Brake: Power off activated electro-  
 magnetic brake  
 Speed: upstairs 6,5 m / min.  
 downstairs 10 m / min.  
 Stair angle: 35°  
 Battery load control: incl.  
 Weight: 65 kg  
 Weight handle unit: 16,5 kg  
 Weight driving unit: 38,4 kg  
 Weight of battery pack: 10,1 kg




**Shoe attachment**  
 Unterstützungsschuhe



**Multifunction clamp**  
 Multifunktionsklammer

**Minimal landing space // Minimaler Arbeitsbereich**

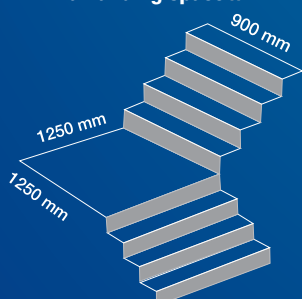

Presented by // Überreicht durch:

